

# Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte

## Einen Schritt voraus



### Wir präsentieren das neue Stride P

Ihre Kunden werden das neue Stride P lieben, denn das ausgeklügelte Design dieses wireless HdOs ermöglicht absolut unkomplizierte Bedienung durch integrierte und intuitiv bedienbare Taster und Lautstärkereglern.


### Stride im Überblick

	Pro	800	700	600	500
Kanäle	20	20	16	10	6
<b>Hauptfunktionen</b> <a href="#">Glossar</a>					
SpeechZone 2	Aktiviert die optimale Mikrofonstrategie, um auch unter schwierigsten akustischen Bedingungen Sprache aus allen Richtungen optimal fokussieren zu können	SpeechZone 2	SpeechZone		
Binaurale räumliche Signalverarbeitung	Beide Hörsysteme arbeiten zusammen, um Sprache zu fokussieren	•	•		
SoundNav	Automatikprogramm, das unterschiedliche akustische Umgebungen identifiziert und die Hörsysteme anpasst, mit dem Fokus auf Gesprächen	7 Umgebungen	6 Umgebungen	5 Umgebungen	2 Umgebungen
Sound Conductor	Dynamische Balance der Hörsystemparameter, um bestmögliches Sprachverstehen und maximalen Komfort bei absolut natürlichem Klang zu garantieren	•	•	•	•
Log It All	Erfasst den kompletten Höralltag des Kunden unabhängig von der gewählten Technologie-Ebene und bietet damit objektive Daten, die bei einer Beratung herangezogen werden können, um unter Berücksichtigung des Lebensstils die richtige Technologie-Ebene zu wählen	•	•	•	•
MyMusic	Maximaler Musikgenuss durch ein individuell konfiguriertes Musikprogramm	Autom. binaural synchronisiert	Autom. binaural synchronisiert	•	•
Binaurales Telefon	Streamt Audiosignale vom Telefonohr zum Gegenohr, ohne dass dazu ein Zubehörgerät notwendig ist	•	•	•	•
Automatischer Anpass Manager	Führt neuversorgte Höreräteträger intelligent und nicht wahrnehmbar von einer Anpassung mit maximaler Spontanakzeptanz zu den Verstärkungswerten, die für langfristig optimales Sprachverstehen benötigt werden	•	•	•	•
<b>Funktionen</b>					
Adaptiv direktional	Richtmikrofonstrategie, die mehrere Störgeräuschquellen erkennt und unterdrückt	Multiband	Multiband	Multiband	Multiband
Frequenzkompression	Komprimiert und verschiebt nicht hörbare hohe Frequenzanteile hin zu hörbaren tieffrequenteren Bereichen	•	•	•	•
AntiShock	Reduziert unangenehm laute Signale, ohne Sprache negativ zu beeinflussen	•	•	•	•

### Allen Technologie-Ebenen gemeinsam:

- Pinna Effekt
- Natural Sound Balance
- Data Logging
- Rückkopplungsmanager
- Windmanager
- Tinnitus Masker
- Manuelle Programme
- Streaming Programme
- DuoLink
- Easy-t
- Easy-DAI
- IntelliVent-Technologie für alle Arten von Otoplastiken
- Plasmabeschichtung
- IP67 für Stride P und Stride P Dura
- T-Spule
- WDRC Verarbeitung mit NAL-NL1, NAL-NL2 und DSL v5
- Lineare Verarbeitung mit DSL v5

Kompatibilität kann je nach Bauform eingeschränkt sein  
Zubehör unterstützt das Hörerlebnis und ist in allen Technologie-Ebenen verfügbar.

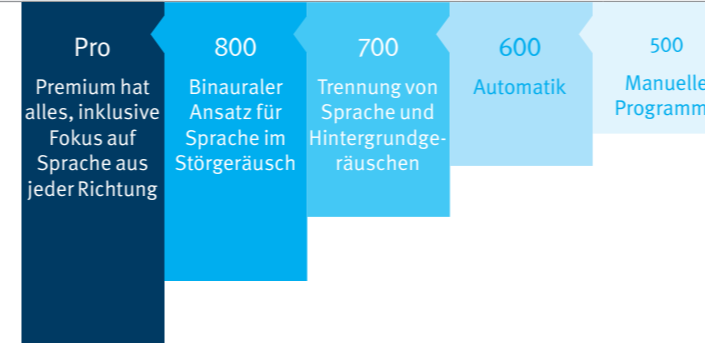

# Stride™

Powered by North

unitron. Hearing matters



# Bieten Sie jedem Kunden das passende **Stride**

Stride™ ist richtungsweisend in Bezug auf kundenfreundlichem Design. Diese neue Hörgerätefamilie mit Hinter-dem-Ohr (HdO) und Im-Ohr (IdO) Modellen bietet die Ästhetik, den Tragekomfort und die intuitive Bedienung, die Ihren Kunden wichtig ist und ihre Hörbedürfnisse erfüllt. Da Stride auf North basiert, der Plattform, die dem natürlichen Hören eine ganz neue Richtung verleiht, bietet es Technologien, die Ihren Kunden ermöglichen, in allen Hörumgebungen ihres Alltags mühelos Gespräche zu führen. Es war noch nie so leicht für jeden Kunden das passende Stride zu finden.



**Stride HdOs**

Stride P ist das neue attraktive wireless HdO mit einer 13er Batterie und zwei Bedienelementen. Stride P Dura ist feuchtigkeitsgeschützt und besonders robust.




**Stride IdOs**

Die Stride IdOs sind innen wie außen neu und bieten eine breite Palette an Bauformen, intuitiv bedienbare Regler, verbesserte Widerstandsfähigkeit und optimalen Komfort.

# Mit Zuversicht Gespräche führen

Unser neues Automatikprogramm SoundNav garantiert eine präzise Klassifizierung von sieben unterschiedlichen akustischen Umgebungen. Vier dieser Umgebungen legen den Schwerpunkt speziell auf Gesprächssituationen. SoundNav arbeitet harmonisch mit den bahnbrechenden Technologien Sound Conductor und SpeechZone™ 2 zusammen, um Ihren Kunden stets bestmögliches Sprachverstehen, maximalen Hörkomfort in jeder Umgebung und höchsten Musikgenuss zu ermöglichen.

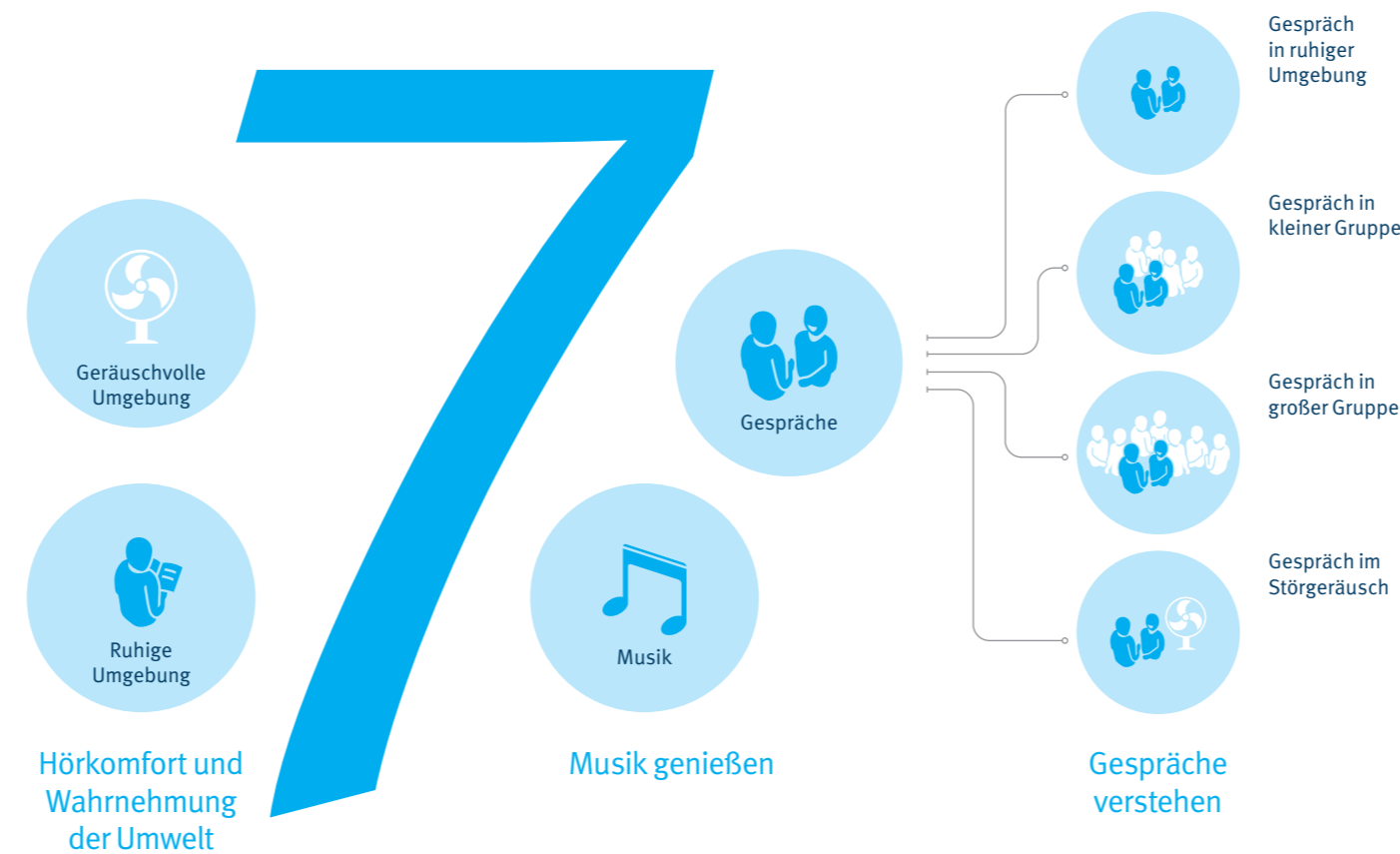

Unitron unterstützt Sie mit innovativen Lösungen, die Ihre Kunden überzeugen und Ihren Geschäftserfolg steigern. Die Grundlage dafür bildet unsere North Plattform mit ihren einzigartigen Technologien. Die Mehrprogrammautomatik SoundNav zum Beispiel, sorgt mit Ihren sieben unterschiedlichen Umgebungen dafür, dass Ihre Kunden sich in jeder Umgebung mühelos unterhalten können. Log It All garantiert eine objektive Beratung, da Sie exakt nachvollziehen können, ob, wie häufig und wie lange sich der Träger in den unterschiedlichen SoundNav Umgebungen aufgehalten hat. Und dank Flex™ können Sie die Erkenntnisse über den Höralltag Ihrer Kunden, die Sie aufgrund der Log It All Daten erhalten, direkt anwenden und die korrekte Technologie-Ebene anpassen. Alle diese Technologien sind in den Hörgerätemodellen Stride und Moxi™ verfügbar, die entwickelt wurden, um den individuellen Bedürfnissen Ihrer Kunden bestmöglich gerecht zu werden.